

SJUKHUSVAGNAR



ROLLCO

SPECIALIZED
ON LINEAR MOTION



Bild 1

Vi har lagt stor omsorg på att säkerställa att informationen i den här katalogen är korrekt, men reserverar oss för eventuella tryckfel och felskrivningar. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående avisering.

All återgivning, även delvis, är tillåten endast med skriftligt tillstånd från Rollco.

Index

PRODUKTÖVERSIKT	4
Egenskaper	4
Standardvagnar	4
Specialvagnar	5
STANDARDVAGNAR	6
Vagntyper	6
STANDARDVAGNAR	7
Lådor	7
TILLBEHÖR	8
URVALSGUIDE	10
Att välja sjukhusvagn	10
Beräkna vagnstorlek	10
ORDERNYCKEL	11

Rollco Sjukhusvagnar

Rollcos sjukhusvagnar är helt kundanpassade för att uppfylla kraven för varje sjukhusavdelning. De flesta vagnar har utvecklats i nära samarbete med vårdpersonalen. En av de viktigaste egenskaperna med våra sjukhusvagnar är att de är lätta att rengöra och desinficera. Materialet är tåligt och klarar av alla typer av rengörings- och desinfektionsmedel.

Alla sjukhusvagnar tillverkas i vår verkstad i Helsingborg. Vi har ett par standardvagnar tillgängliga för testning. Vi kan även på begäran erbjuda prototypvagnar för att säkerställa att vagnen uppfyller alla krav. Vi har ett brett utbud av kulörer och tillbehör.

Kontakta oss gärna med dina frågor. Vi hjälper till att hitta rätt lösning just för dig.

Egenskaper

- Alla ytor kan rengöras och desinfekteras.
- Tillverkad av anodiserad aluminium och antistatisk laminat.
- Lättrullade och låsbara hjul.
- Tillgänglig i många olika kulörer.
- Flexibla förvaringsalternativ med valbart antal lådor och dörrar, låsbara som tillval.
- Fullt utdragbar med själv- och mjukstängande lådor och dörrar.
- Alla sidor kan förses med krokar och fästen för olika tillbehör.
- Brett urval av tillbehör, som t.ex. utdragbar skrivskiva.

Standardvagnar



Bild 2



Bild 3

Specialvagnar



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 8



Bild 7



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Vagntyper

Rollcos sjukhusvagnar finns i två standardmodeller, en låg och en hög variant. Vi kan också på begäran specialbygga vagnar med andra mått och annan utformning. Mått på bredd och djup nedan gäller våra standardmodeller. Höjd och antal lådor anpassas alltid enligt kundens önskemål. Sidlådor, sidhyllor och lås finns som tillval och kan placeras antingen på vänster eller höger sida.

Låg




Hög

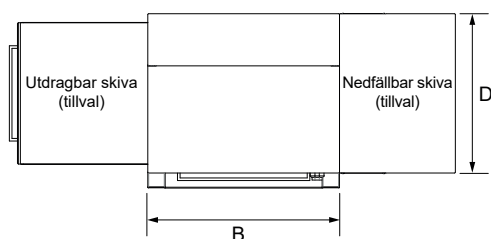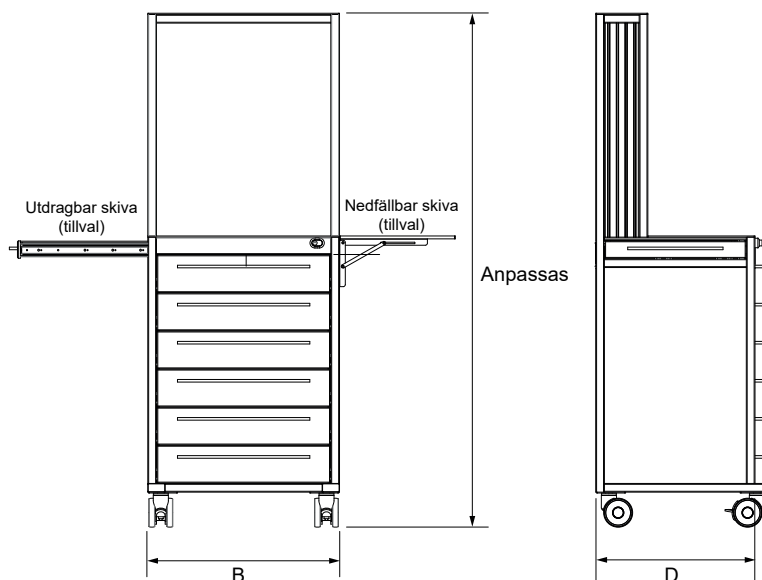

OBS! Alla arbetsytor är grå (0074) som standard.

Bredd	Djup	Höjd
500 eller 662 mm	450, 500 eller 550 mm	Anpassad


Lådor

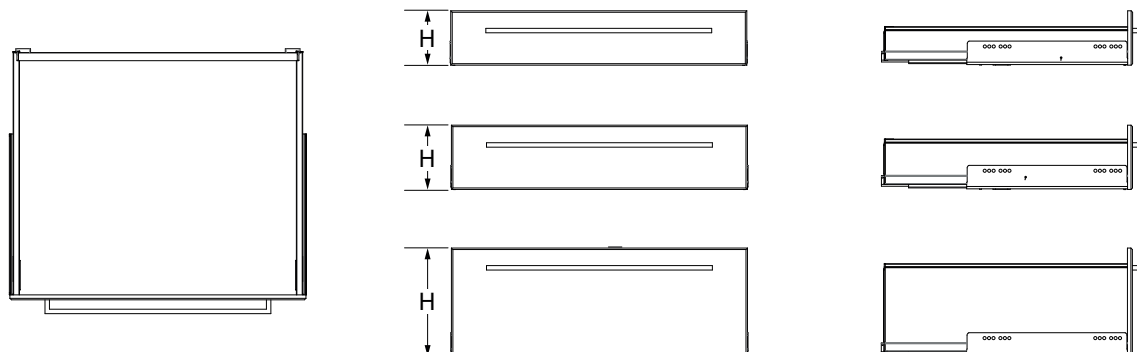

Typ		Min. höjd med lås	Min. höjd utan lås
N (Låg)	Låda överst	110	95
	Andra lådor	100	80
M (Medel)		130	110
C (Hög)		220	200

Kulörer

Vi har sju standardfärger, men kan på begäran även erbjuda andra kulörer.



Vit / 0085



Grön / 0059



Gul / 0212



Blå / 0237



Grå / 0074




Svart / 0080




Röd / 0067


Tillbehör

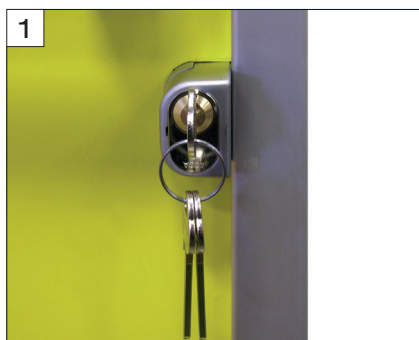

1 Nyckellås på sida med individuellt nyckelnummer (låser en låda)

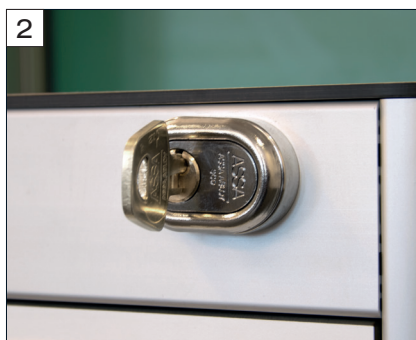


2 Nyckellås på front med individuellt nyckelnummer (låser flera lådor)

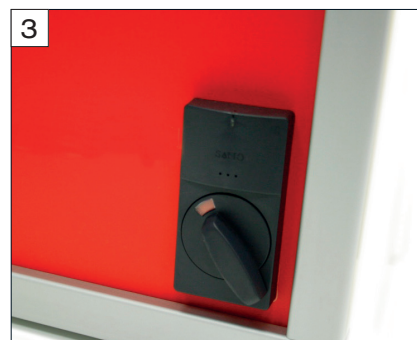


3 Elektroniskt kortlås (låser en låda)




4 Elektroniskt kortlås (låser flera lådor)

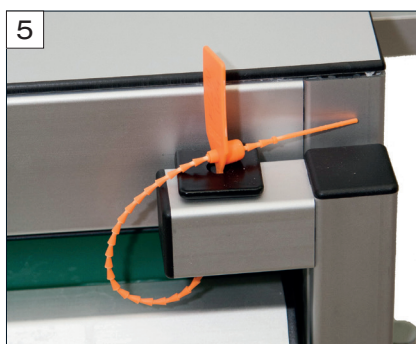

5 Lås för plombering av lådor

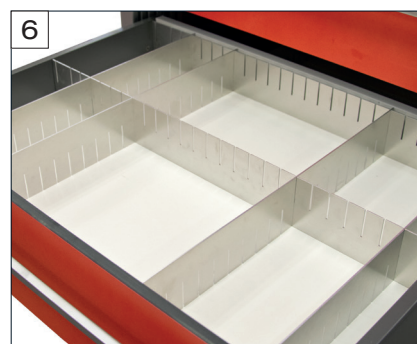

6 Lådinsatser i aluminium

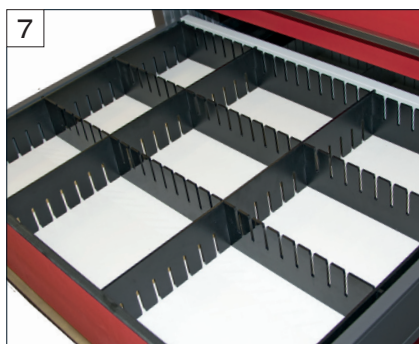

7 Lådinsatser i plast



8 Hylla i rostfritt stål



9 Utdragbar skiva



10 Nedfällbar skiva



11 Vipplådor (3, 4 eller 5 lådor per rad)



12 Hållare för riskavfallsbehållare (behållare ingår ej)




13 Hållare för tvål och handsprit
(tvål/ desinfektionsmedel ingår ej)




14 Handtag



15 IVA skena

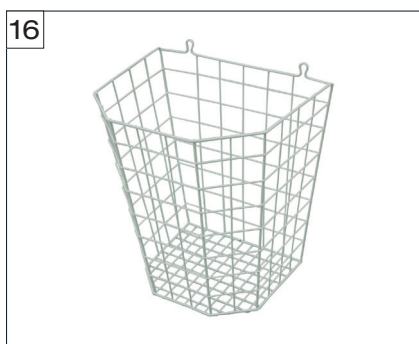

16 Avfallskorg, vit plastad stål

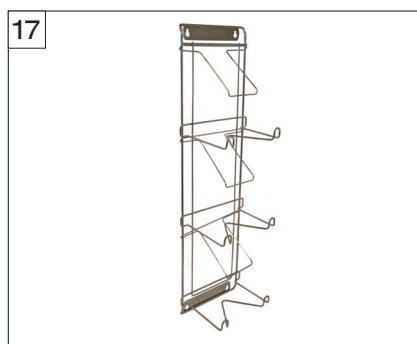

17 Hållare för handskådor (för 3 eller
4 lådor)



18 Droppställning



19 HLR-bräda

Att välja sjukhusvagn


- Var kommer vagnen att förvaras och vad behöver jag förvara i den? Behöver jag t.ex. mycket läkemedel i en operationssal? Eller behöver stora ytor att arbeta på?
- Hur många lådor behöver jag?
- Vilken lådstorlek behöver jag? Hur höga är de största föremålen som jag vill få plats med i lådan?
- Hur hög kommer vagnen att bli?
- Vill jag kunna låsa lådorna?
- Behöver jag ha lådinsatser?
- Vill jag ha utdragbara och/eller nedfällbara sidobordsskivor? Observera att det inte går att montera lås på samma sida som utdragbar skiva.
- Behöver jag en hög sjukhusvagn med extra förvaring?
- Vilken kulör och vilka tillbehör vill jag ha?

Beräkna vagnstorlek

1. Vilken bredd och vilket djup behöver jag?
Ex: 500 mm bred och 450 mm djup
2. Hur många lådor behöver jag?
Ex: 4 lådor
3. Beräkna höjden på varje låda genom att addera 50 mm till höjden på det högsta föremålet som ska förvaras i lådan. Avrunda uppåt till närmaste 10 mm.

Ex:


Högsta föremålet är 145,5 mm.	145,5
Lägg till 50 mm	+ 50,0
	195,5
Runda av uppåt till närmaste 10:e mm	≈ 200,0

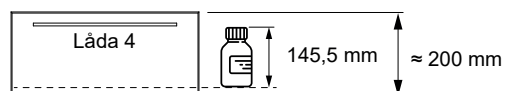

4. Beräkna den totala höjden på vagnen genom att addera höjden på alla lådor. Den översta lådan behöver ett utrymme på 3 mm och de andra lådorna behöver 1,5 mm vardera. Lägg sedan till 215 mm, vilket är den totala höjden för hjul, toppskiva osv. See tabell på sidan 7 för information on olika lådtyper och minimihöjder.

Ex:

Låda 1 (120 mm lådhöjd + 3 mm)	123,0
Låda 2 (120 mm lådhöjd + 1,5 mm)	121,5
Låda 3 (170 mm lådhöjd + 1,5 mm)	171,5
Låda 4 (200 mm lådhöjd + 1,5 mm)	201,5
Fast mått	+ 215,0
	832,5

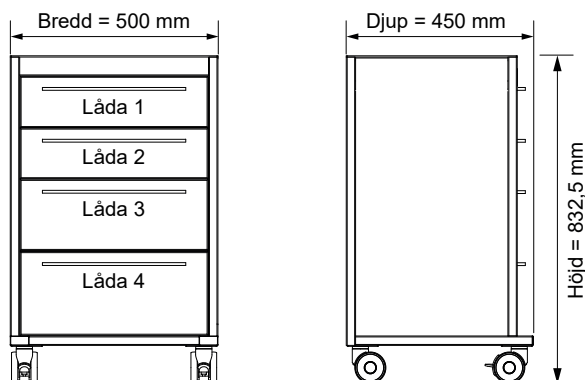

Sjukhusvagnar

HTS - 662 - 500 - PL - FR - DR - 5

Typ

S = Låg

T = Hög

Bredd

500 eller 662 mm

Djup

450, 500 eller 550 mm

Bricka/skiva 1

P = Utdragbar

F = Nedfällbar

R = Höger

L = Vänster

Bricka/skiva 2

P = Utdragbar

F = Nedfällbar

R = Höger

L = Vänster

Lås

D = Digitalt

K = Nyckel

R = Höger

L = Vänster

Antal lådor

OBS! Vänligen kontakta oss för andra dimensioner, utföranden eller alternativ.



Rollco AB
Box 22234
Ekvändan 3
250 24 Helsingborg
Sweden
Tel. +46 42 150040
Fax +46 42 150045
www.rollco.se

Rollco A/S
Ladegårdsvej 2
7100 Vejle
Denmark
Tel. +45 7552 2666
Fax +45 7552 0708
www.rollco.dk

Rollco Oy
Sarankulmankatu 12
33900 Tampere
Finland
Tel. +358 207 57 97 90
Fax +358 207 57 97 99
www.rollco.fi

Rollco Norge AS
Industrigata 6
3414 Lierstrada
Norway
Tel. +47 32 84 00 34
Fax +47 32 84 00 91
www.rollco.no

Rollco Taiwan
No. 28, Lane 125, Da-an Road
Shulin District 238
New Taipei City, Taiwan
Tel. +886-2-8687-2726
Fax +886-2-8687-2720
www.rollco-tw.com

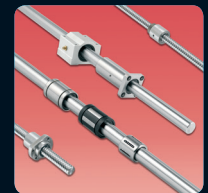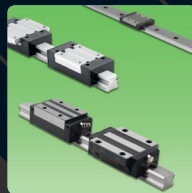

ROLLCO
SPECIALIZED
ON LINEAR MOTION